

Kartlegging av skrantesjuka hos hjortevilt

Oppdagelsen av skrantesjuka hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Jegere som jakter i innsamlingsområder bes sende inn prøver til CWD-testing som er ett vesentlig ledd for kartleggingen.

Innholdet i Jegerpakken

- ✓ Skje til hjerneprøven
- ✓ Prøveglass til hjerne + svelglymfeknuter
- ✓ Poser til avfall
- ✓ Hansker
- ✓ Merkelapp for hjortevilt
- ✓ Ferdig frankert lapp til konvolutt
- ✓ Lynlåspose til prøveglass

Merkelapper

Merkelappen for hjortevilt inneholder et sett klistremerker med identiske strekkodenumre. Numrene på lappen tilsvarer ID på det enkelte dyret du skal sende inn. Merkelappen med tilhørende klistrelapper skal kun benyttes til ett individ.

Den store klistrelappen skal fylles ut med navn, kommune, art og telefonnummer. Skriv tydelig og med blokkbokstaver. Denne klistres på røret som inneholder hjerne og lymfeknuter.

Merkelapp for hjortevilt

Denne merkelappen brukes til jakt og felthutt av eig, hjort, rådyr og villren

Alle prøver merkes med klistrelapp

Alle prøver må merkes med strekkoder. Bruk disse for merking av dyr. Prøvetaker og søker alle finner de på hjorteviltregisteret.no. For felthuttregistrering på CWD-prøve må strekkodenummeret være registrert sammen med dyret

Denne store delen festes til underlæveprøve

Ta vare på strekkoden! Du trenger dette nummeret for å kunne hente ut resultatet i hjorteviltregisteret når undersøkelsen er ferdig.

Fyller ut kun for jakt

Kommune/villreinområde: _____

Valdnavn: _____ Valdnr: _____

Jaktfelt: _____ Jaktfeltnr: _____

Navn: _____ Tlf.nr: _____

Fellingsted: _____ Fellingsdato: _____

Art: Eig Hjort Rådyr Villren

Kjenn: Hurr Hann

Alder: Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre

Vekt: _____ kg. Er slaktet nøyaktig veid? Ja Nei

Merknad: _____

Gevinstaker: høyre _____ venstre _____

Melk i juni: Ja Nei

Ant. kaver (ølge med humdyret): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ant. kaver (følge med humdyret): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Dersom mor og kalv felles, noter mors strekkoden: _____

I områder med kjeveinnsamling skal hele merkelappen festes til kjeven og leveres sammen med denne. Husk å fylle ut all informasjon om dyret.

Hvilke dyr skal testes

Villrein: Alle dyr 1 år og eldre

Elg/Hjort: Alle dyr 2 år og eldre

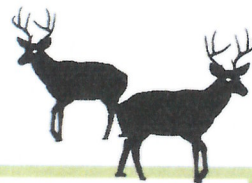

På neste side vil du også finne QR-koder. Om du laster ned en QR-leser på mobilen, vil disse kunne ta deg rett til instruksjonsvideoer for prøvetaking.

Slik tar du hjerneprøve

1. Merk prøveglasset med den ferdige utfylte informasjon og skru av lokket. Ta deretter på engangshansker.
2. Skill hodet til hjortedyret fra kroppen, kutt mellom kraniet og øverste nakkevirvel.
3. Legg hodet slik at kjeven til dyret vender opp, og åpningen til hjernen vender mot deg. Løsne rundt åpningen til hjernen med fingeren. Skjeen føres inn i åpningen til hjernen, helt til den butter (se figur neste side). Roter deretter skjeen fra side til side før du trekker skjeen sakte ut mens spissen på skjeen presses opp mot kjeven.
4. Legg prøven i prøveglasset uten å grise til utsiden av glasset.

Slik finner du svelglymfeknute

1. Legg det avkuttete hodet i samme posisjon som ved hjerneuttaket. Bruk engangshansker.
2. På hver side av luftrøret ligger de indre halspulsårene. Disse ligger over en muskel og sees tydeligst når luftrøret strekkes opp. På oversiden av denne muskelen og ganske nær svelget ligger også svelglymfeknutene.
3. Bruk fingrene for å kjenne etter lymfeknutene. De er harde runde kuler. Bruk en kniv og skjær løs to lymfeknuter.
4. Legg lymfeknutene i samme glasset som hjerneprøven
5. NB: om man ikke finner lymfeknutene, så skal du sende hjerneprøven likevel.

NB! Oppbevar prøvene kjølig frem til de sendes

For å finne prøvesvaret ditt **MÅ** du registrere felte dyr i Sett og skutt, enten via app eller nettside

Sett og skutt

Appen «Sett og skutt» for mobil lanseres sommeren 2019. Det er også mulig å registrere «sett og skutt» ved å logge inn som jeger på www.hjorteviltregisteret.no. Prøven må registreres for at laboratoriet får informasjon om prøven, og for at du kan finne resultatet ditt når analysen er ferdig.

Prøveresultatet kan du søke opp på www.hjorteviltregisteret.no/helse



Veterinærinstituttet
Norwegian Veterinary Institute



Mer informasjon:

www.hjortevilt.no/skrantesjuka


SLIK GJØR DU DET



Fyll ut informasjon på klistremerket «til hjerneprøve»
Skriv tydelig med blokkbokstaver

Jakt Følvet
Navn: **KARI NORDMANN**
Telefon: **81549300**
Kommune eller vilkårsområde: **OSLO**
 Bjg Høst Rådyr Vibein

Fest den utfylte klistrelappen på prøveglasset

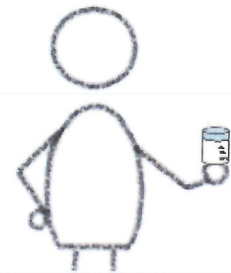

Sørg for at du fester klistrelappen denne veien



Usikker på prøvetaking?
Skann QR-kode for å se video




Lymfeknute



Hjerneprøve

Med kjeven vendt opp, føres skjeen inn denne veien:

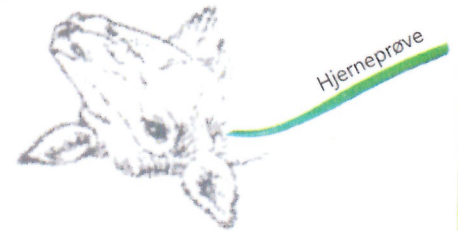

Hjerneprøve og lymfeknute bør se slik ut etter prøvetaking



Hjerneprøve

Lymfeknute

Samle begge prøvene i prøveglasset

Skru korken godt igjen, og unngå blodsøl



Legg prøveglasset i lynlåsposen og så i konvolutten, og merk med frankeringslapp



Ta vare på strekkodenummeret!

Lever og registrer konvolutten på postkontor så snart som mulig



VIKTIG

dyret må registreres i settogskutt



Takk for ditt bidrag

SKITT JAKT!

